

mindray

Inbio²⁵
AÑOS

LÁMPARA SCIALITICA

HYLED Q2

El brillo sigue tu movimiento.



Especificaciones técnicas

- Diseño en 3 hojas, curvado
- 6 LEDs – 3 unidades de LED
- Vida útil: 80.000 horas
- Luminosidad: 70,000 Lux
- Diámetro de luz: 170 mm
- T° de color: 4.350 K
- CRI/R9: 99/97
- Panel de comando con teclado sensible

Incluye

- Unidad principal
- Sistema de suspensión de techo
- Brazos resorte

Visión clara

Su alta luminosidad con un rendimiento de luz fría de color natural proporciona al equipo médico lo esencial para el éxito de la cirugía.


Campo de luz ajustable

El campo de luz se puede ajustar de 17cm a 25cm para adaptarse a las incisiones quirúrgicas



Brillo suave

La serie HyLED Q proporciona un patrón de iluminación uniforme cuando se encienden las luces quirúrgicas, siguiendo la sencibilidad del ojo humano según la ley de Weber

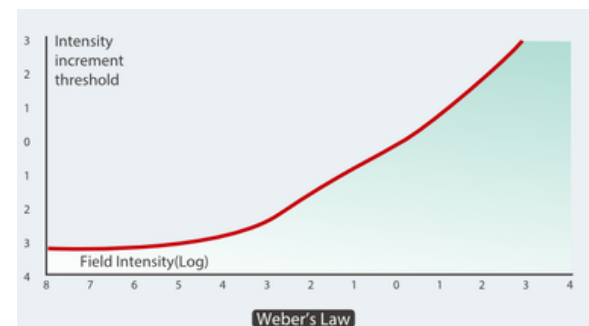

Colores verdaderos

Índice de reproducción cromática de hasta 99



Luz fresca y segura

Diseñado para cumplir con la nueva norma IEC 60601-2-41, para la cual el límite de irradiancia se ha reducido a 700 W/m²



Eficiencia del flujo de trabajo

Mejorar la ergonomía

Fácil manejo y posicionamiento sin esfuerzo. Mango esterilizable para ajustar la intensidad (opcional)




Ajuste el encendido/apagado de la luz, la intensidad de la iluminación y el tamaño del campo quirúrgico mediante botones táctiles intuitivos



Control de infecciones

Apto para limpieza con diversos desinfectantes. Compatible con sistemas de flujos de aire regular

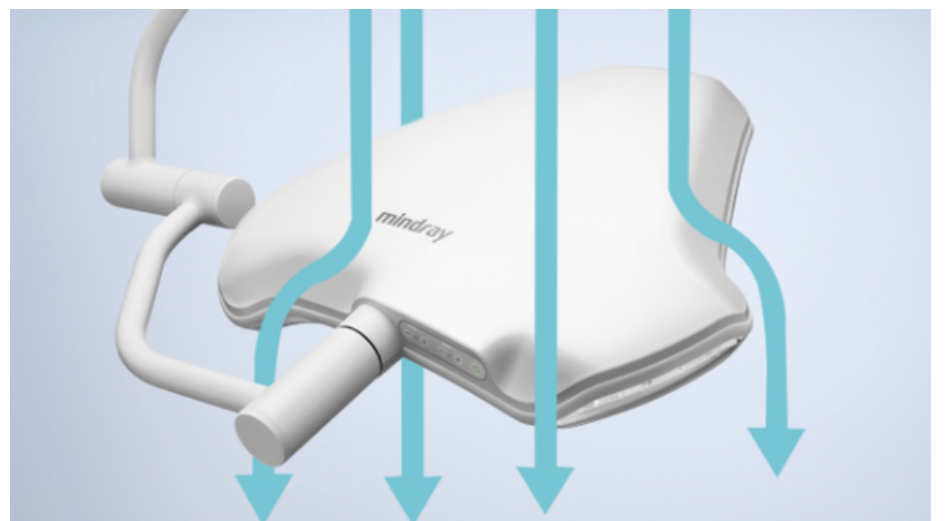

Optimización de la sostenibilidad


Impresionante vida útil del LED

Vida útil del LED de hasta 80.000 horas con 5 años de garantía



Tecnología THERMO antiatenuación

La compensación y optimización de la curva característica de atenuación de las perlas de luz LED de larga duración garantizan una iluminación estable durante diez años de servicio.

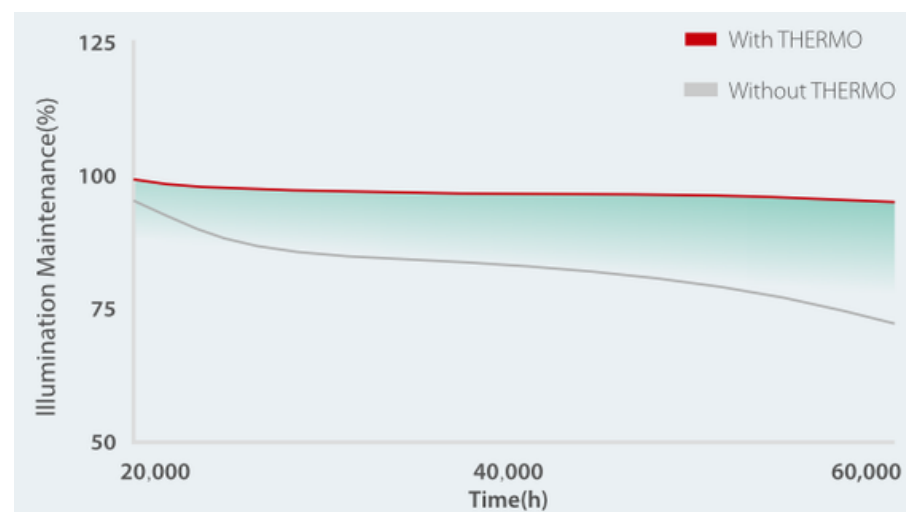

Flexibilidad y versatilidad

Montaje en el techo



Montaje en la pared



Versión móvil



Colgante montado





www.inbio.com.ar

3492 710250

ventas@inbio.com.ar

Inbio²⁵
AÑOS