

mindray

Inbio<sup>25</sup>  
AÑOS

# LÁMPARA SCIALITICA

## HYLED Q6

*El brillo sigue tu movimiento.*



# Especificaciones técnicas

- Modo endoscopía: 5% de iluminación
- Luminosidad: 160.000 Lux
- Diámetro de luz (D10): 170-250 mm
- Campo lumínico (D50/D10): >50%
- Temperatura de color: Standard: 4350K o 5000K
- Cantidad de LEDs: 24
- Cantidad de unidades LED: 9
- Vida útil del LED: 80.000 horas
- CRI / R9: 99/97
- Certificación IP55: resistente al agua y polvo.

# Incluye

- Unidad principal
- Sistema de suspensión de techo
- Brazos en C
- Mango funcional

## Visión clara

Su alta luminosidad con un rendimiento de luz fría de color natural proporciona al equipo médico lo esencial para el éxito de la cirugía.


## Campo de luz ajustable

El campo de luz se puede ajustar de 17cm a 25cm para adaptarse a las incisiones quirúrgicas




## Brillo suave

La serie HyLED Q proporciona un patrón de iluminación uniforme cuando se encienden las luces quirúrgicas, siguiendo la sencibilidad del ojo humano según la ley de Weber

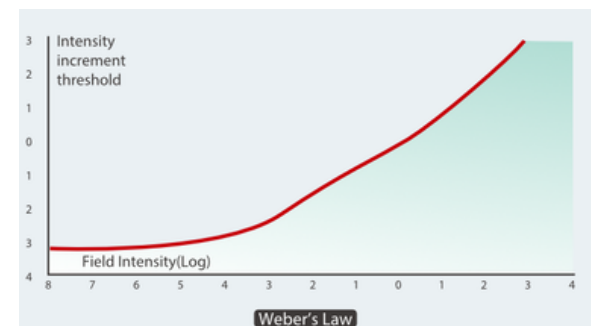

## Colores verdaderos

Índice de reproducción cromática de hasta 99

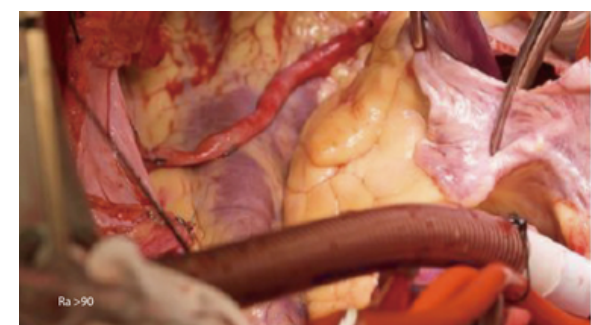

## Luz fresca y segura

Diseñado para cumplir con la nueva norma IEC 60601-2-41, para la cual el límite de irradiancia se ha reducido a 700 W/m<sup>2</sup>



# Eficiencia del flujo de trabajo

## Mejorar la ergonomía

Fácil manejo y posicionamiento sin esfuerzo. Mango esterilizable para ajustar la intensidad (opcional)




Ajuste el encendido/apagado de la luz, la intensidad de la iluminación y el tamaño del campo quirúrgico mediante botones táctiles intuitivos



## Control de infecciones

Apto para limpieza con diversos desinfectantes. Compatible con sistemas de flujos de aire regular

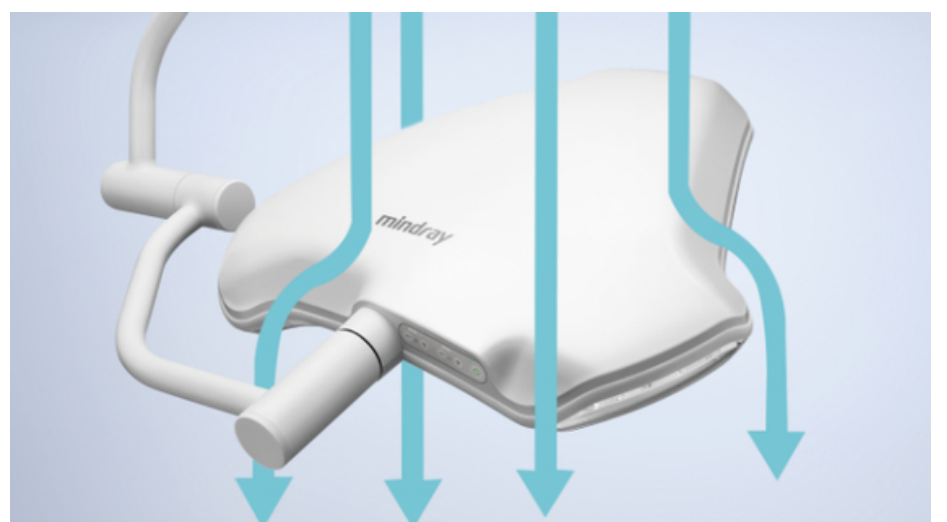

# Optimización de la sostenibilidad


## Impresionante vida útil del LED

Vida útil del LED de hasta 80.000 horas con 5 años de garantía



## Tecnología THERMO antiatenuación

La compensación y optimización de la curva característica de atenuación de las perlas de luz LED de larga duración garantizan una iluminación estable durante diez años de servicio.

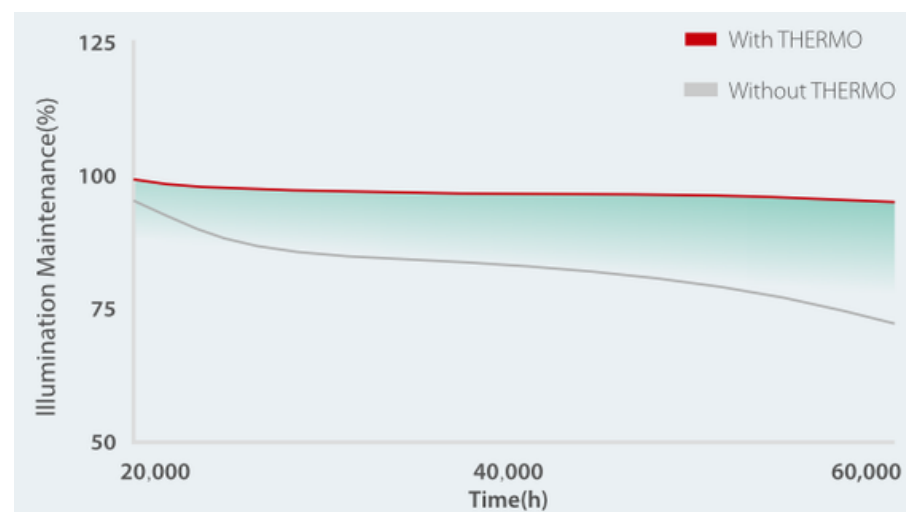

# Flexibilidad y versatilidad

## Montaje en el techo



## Montaje en la pared



## Versión móvil



## Colgante montado





[www.inbio.com.ar](http://www.inbio.com.ar)

3492 710250

[ventas@inbio.com.ar](mailto:ventas@inbio.com.ar)

---

**Inbio**<sup>25</sup>  
AÑOS