


INCUBADORA DUAL YP2200B




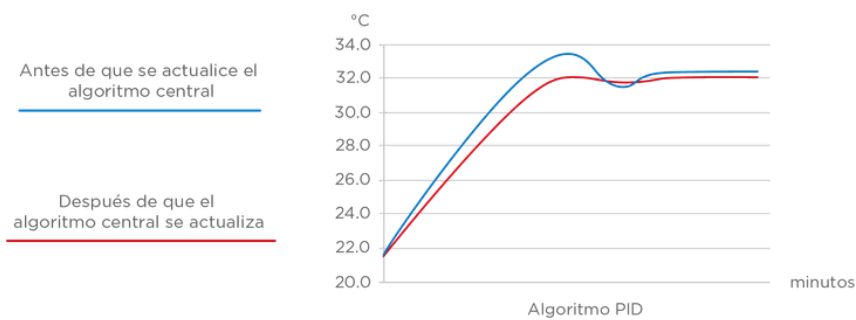

Control preciso


Equipado con un sistema de control integrado inteligente y un sistema de visualización android, el algoritmo central de la EIP se actualiza y la fluctuación de temperatura en la Caja es más estable;

Sistema científico de circulación de aire con salida de aire delantera y trasera y retorno de aire izquierdo y derecho, la apertura de la escotilla forma automáticamente una cortina de aire vertical para reducir la pérdida de calor; El sensor de humedad recoge datos efectivos en tiempo real y puede lograr rápidamente un efecto de humedad del 95%.

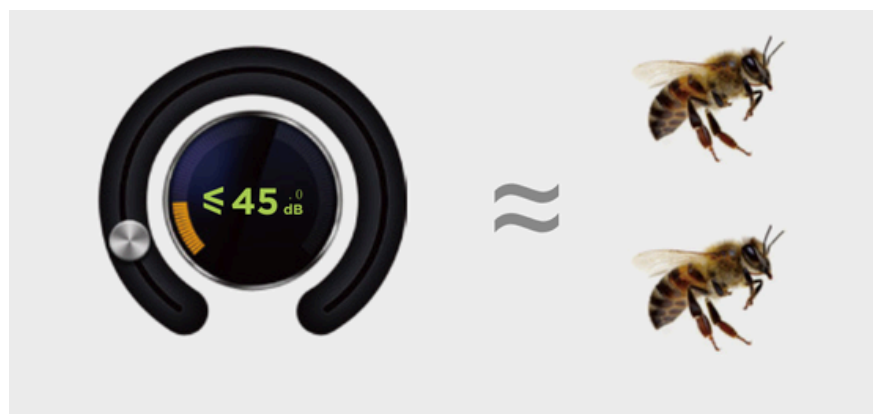

Ambiente tranquilo

Adoptar un motor de corriente continua sin cepillo para reducir eficazmente el ruido en la incubadora y proporcionar un ambiente de tratamiento cómodo; Bajada lenta del panel de la puerta, sin necesidad de sujetarlo con la mano, caída silenciosa.

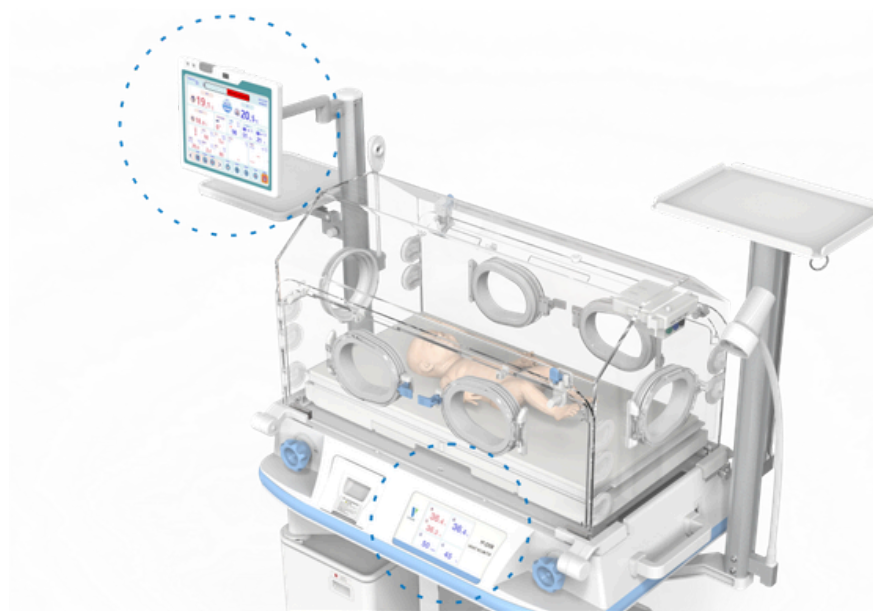


Pantalla doble

Pantalla táctil en color TFT externa de 12.1" + pantalla LCD en color integrada de 5,6" para facilitar la visualización multiángulo.



Espacio de almacenamiento

Cajones de almacenamiento giratorios de gran capacidad que se ajustan a la ergonomía, con cestas de almacenamiento externas para cables y otros accesorios.

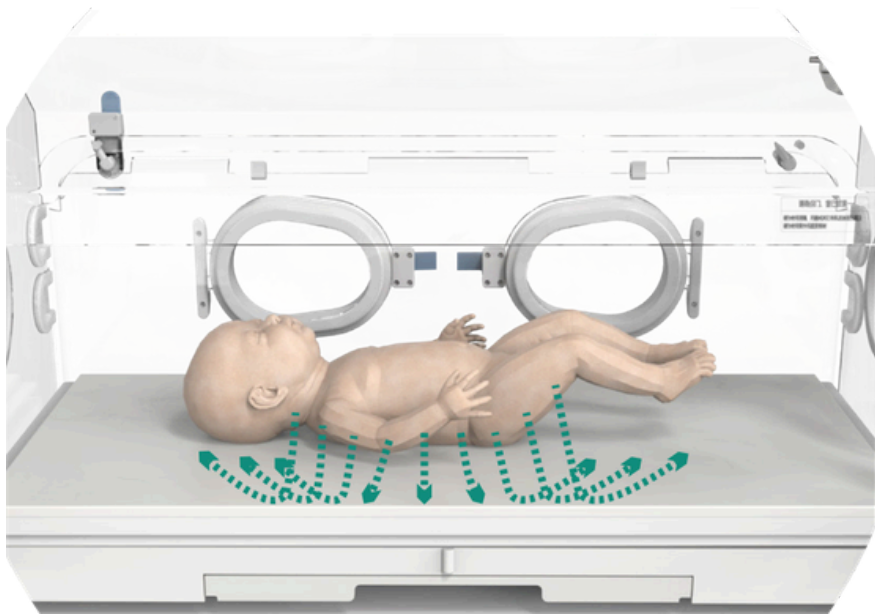

Diseño humanizado

Colchón antidecúbito de presión, material tpu, antibacteriano e impermeable, suave y transpirable, cuidado de la piel tierna del recién nacido;

El control eléctrico de la cuna tiene una inclinación suave y ajustable de varios ángulos, y el ángulo de la mecedora se puede ajustar a través de la pantalla táctil LCD, que admite un solo clic para nivelar, lo que hace que la operación sea más conveniente;

Sistema de pesaje incorporado, fácil de medir el peso del paciente y controlar los cambios de tendencia de peso.



Funcionamiento seguro

La humidificación a vapor de alta temperatura puede matar la mayoría de los patógenos comunes en el tanque de agua y reducir en gran medida el riesgo de infección;

Tanque de agua tipo cajón delantero, que el personal médico puede sacar en su conjunto, lo que facilita la operación de limpieza y desinfección sin ángulos muertos;

Triple protección independiente de sobretemperatura, monitoreo de sensores múltiples, activación oportuna de advertencias de sonido y luz, proporcionando múltiples protecciones de seguridad;

Dispositivo de filtrado incorporado, que puede filtrar eficazmente más del 99% del polvo y crear un entorno antibacteriano en la incubadora.



Primer modelo de padres e hijos en China

Mantener eficazmente la temperatura en la incubadora y apoyar el cuidado canguro, lo que ayuda a mantener la estabilidad fisiológica de los bebés prematuros;

Cámara: permite la captura local de imágenes y la grabación de vídeo para facilitar la revisión clínica.

Módulo de monitorización

Excluir eficazmente las interferencias de movimiento y mejorar el rendimiento de la medición en condiciones de baja perfusión y movimiento corporal;

Puede reducir significativamente la incidencia de retinopatía grave (ROP) en bebés prematuros;

Monitoreo de CO₂ Masimo, que proporciona dos métodos de medición, el flujo principal y el flujo lateral externo, y monitorea el CO₂ con precisión en tiempo real;

Monitoreo de SunTech NIBP, con doble función de protección de Sobretensión de software y hardware.





www.inbio.com.ar

3492 710250

ventas@inbio.com.ar

Inbio²⁵
AÑOS