


# INCUBADORA DUAL YP2800B



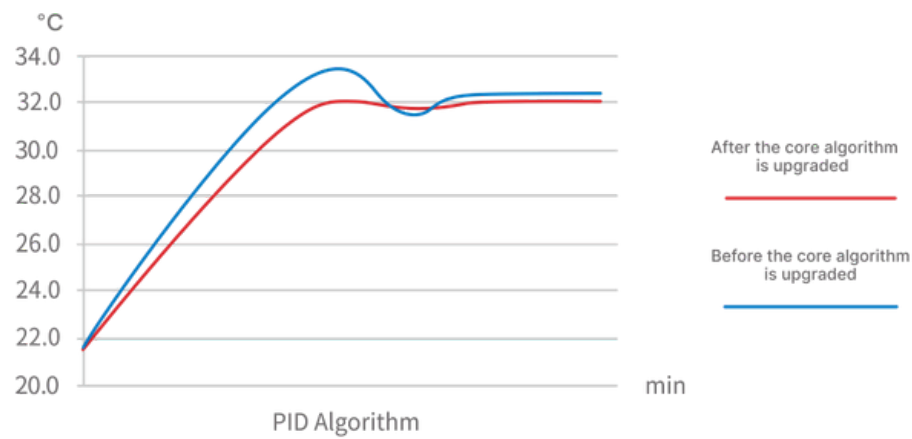

## Control preciso

- Equipado con un sistema integrado y un sistema de visualización Android, el algoritmo central PID actualizado hace que la fluctuación de temperatura en la incubadora sea más estable.
- El sistema científico de circulación de aire con salida de aire frontal-trasera y retorno de aire izquierdo-derecho puede formar una cortina de aire vertical automática para minimizar la pérdida de calor.
- El sensor de humedad recopila datos efectivos en tiempo real, alcanzando rápidamente un efecto de humidificación del 95%.



## Ambiente tranquilo

- Se utiliza un motor de CC de frecuencia variable para reducir eficazmente el ruido dentro de la incubadora.
- El sistema de amortiguación del panel garantiza que el panel de la puerta se desplome silenciosamente sin necesidad de manipulación.




## Altura ajustable

La altura de toda la máquina se puede ajustar desde ambos lados para adaptarse a las necesidades de personal médico de diferentes estaturas.



## Espacio de almacenamiento

El cajón extraíble bidireccional puede albergar diversos dispositivos médicos pequeños, y la cesta de almacenamiento externa puede alojar adecuadamente cables y otros accesorios.

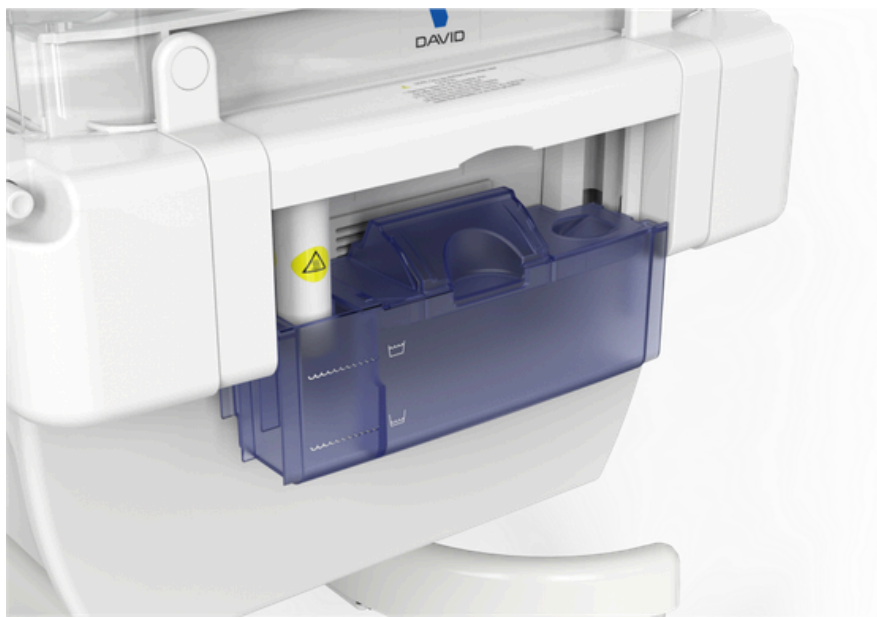


## Ambiente bacteriostático

El método de humidificación con vapor a alta temperatura se utiliza para eliminar la mayoría de las bacterias patógenas comunes en el tanque de agua.

El depósito de agua frontal transparente puede ser desmontado fácilmente por el personal médico para su limpieza y desinfección, sin dejar zonas sin limpiar.

Triple protección independiente contra sobrecalentamiento, monitorización mediante sensores multicanal.

El dispositivo de filtrado incorporado puede filtrar eficazmente más del 99% del polvo.

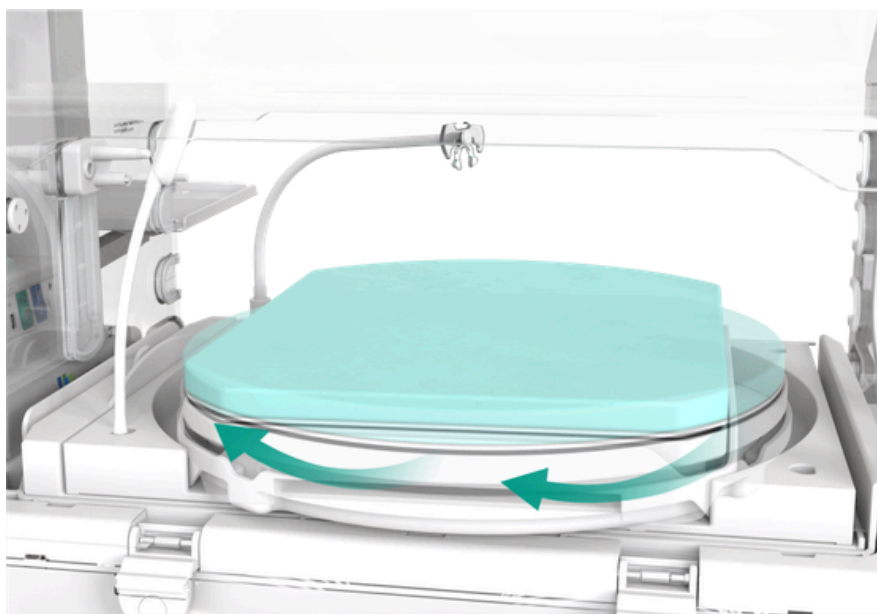

## Diseño fácil de usar

La cuna infantil giratoria bilateralmente de 360° permite al personal médico observar y atender a los recién nacidos en todas las direcciones.

El colchón impermeable para aliviar la presión está fabricado con material TPU, suave y transpirable.

La cuna eléctrica con control de un solo botón se puede ajustar suavemente e inclinar en múltiples ángulos.



## Modo canguro

Mantener eficazmente la temperatura en la incubadora, lo que permite un cuidado al estilo canguro.

Pantalla táctil LCD TFT a color de 10,4 pulgadas, con caracteres grandes claramente visibles desde una gran distancia.

El modo nocturno se puede configurar para reducir el impacto de la estimulación lumínica.

Cámara: capaz de realizar captura de imágenes y grabación de vídeo local.

## Módulo de monitorización

Eliminar la interferencia del movimiento y mejorar el rendimiento de la medición en estados de baja perfusión y movimiento corporal.

Reducir significativamente la incidencia de retinopatía del prematuro (ROP) grave.

El sistema de monitorización de CO<sub>2</sub> de Masimo ofrece dos métodos de medición: flujo principal y flujo lateral externo.

El sistema de monitorización de la presión arterial no invasiva (NIBP) de SunTech cuenta con una doble función de protección tanto de software como de hardware.





[www.inbio.com.ar](http://www.inbio.com.ar)

3492 710250

[ventas@inbio.com.ar](mailto:ventas@inbio.com.ar)

---

**Inbio**<sup>25</sup>  
AÑOS